

市内のAEDケース内に三角巾および使い方のリーフレットを配置しました。

【リーフレット表面】

人にかぶせてお使いください



【お問い合わせ】 蓮田市役所健康増進課 ☎048-768-3111

【リーフレット裏面】


プライバシーに配慮したAEDの使い方

パッドを

素肌に直接貼り付けることができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません。**服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせないように**してください。パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

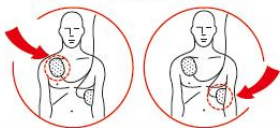

パッドを貼った後に上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【資料提供】 東京都多摩府中保健所 【監修】 公益財団法人 日本AED財団